

報道関係各位

2026 年 2 月 2 日
ティアック株式会社


セキュリティ機能を強化し、より安全性・操作性・信頼性を高めた メディカルビデオレコーダー『MV-5』を発売

TEAC（ティアック）は、2019 年より販売してまいりました MV-1 の後継機種として、セキュリティ機能を強化した新たなメディカルビデオレコーダー『MV-5』を、国内市場向けに 2026 年 4 月より販売いたします。

品名	型名	メーカー希望価格(税抜き)	発売予定日
メディカルビデオレコーダー	MV-5	1,180,000 円	2026 年 4 月
DICOM ゲートウェイ	MV-5D	1,380,000 円	
操作リモコン（オプション）	VS-1	オープン価格	



メディカルビデオレコーダー『MV-5』

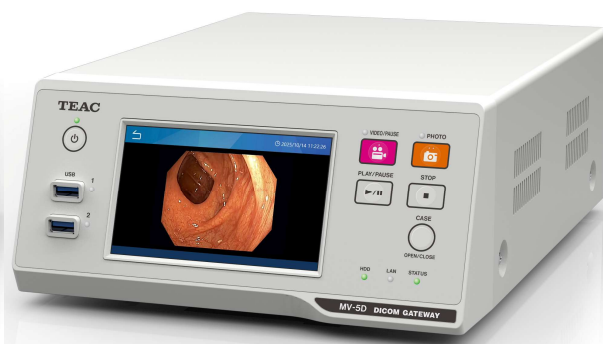

DICOM ゲートウェイ『MV-5D』

『MV-5』は、現行製品である「MV-1」で高く評価されてきた消化器内視鏡との高度な連携機能を継承しつつ、セキュリティ機能を新たに搭載した、MV シリーズの最新機種です。

操作画面となるタッチパネルの形式やアイコンを見直し、直感的で使いやすい操作性を実現しました。外部タッチパネルにも対応しているため、設置場所の自由度が高く、さまざまな使用環境に柔軟に対応可能です。

静止画は2枚/秒の撮影が可能で、さらに動画記録機能では、H.264の保存に加え、高画質で圧縮率の高いH.265にも対応し、汎用性の高いMP4形式に対応しました。これにより、記録した映像の管理や活用がこれまで以上にしやすくなっています。

「MV-1」に付属していたリモコンも利用できる（オプション）ため、「MV-1」をご愛顧いただいた医療現場の皆様においてもスムーズに導入することが可能です。


ネットワークプリント機能も搭載（予定）し、パソコンなど他の媒体を介さず即座に画像を印刷して、患者様へご説明することができます。

また、内視鏡が映し出す映像をDICOMフォーマットとして記録するDICOMゲートウェイ『MV-5D』もラインナップします。『MV-5D』はDICOM規格に対応していない内視鏡からの映像をDICOMフォーマットとしてサーバーへ転送を可能にする機能を持ち合わせたDICOMゲートウェイです。

新機能として、動画をマルチフレーム形式で送信できるようになり、DICOMビューアーなどでの動画再生ができるようになります。

※DICOM(Digital Imaging and Communication in Medicine): 医用画像を扱う機器間での通信プロトコルの標準規格

※DICOMゲートウェイ MV-5Dについては、株式会社スリーゼットが総代理店として販売を行います。

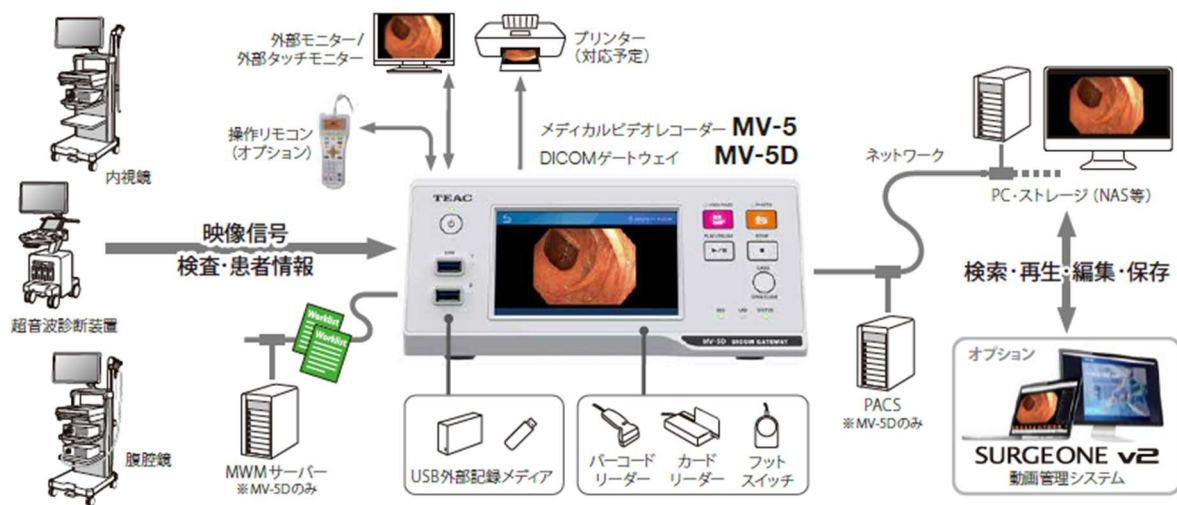

機能紹介

- **セキュリティ機能の強化**
内蔵 HDD を暗号化 / ユーザー制限機能 / USB デバイス使用禁止機能
- **5 インチタッチスクリーン搭載**
- **本体操作 / 外部タッチパネル / 操作リモコン（オプション）で操作可能**
- **医療現場で多く使用される映像信号の入出力に対応**
SDI：3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI
DVI：1920×1200 / 1080p / 1080i / 1280×1024 / 1280×960 / 1024×768 ピクセル
- **映像低遅延**
レコーダーを経由した外部モニター出力において、1 フレーム未満の映像出力※
※SDI 出力時、DVI 出力時
- **1TB の大容量内蔵ストレージ搭載**
- **静止画を 0.5 秒/枚（1 秒間に 2 枚）で記録。状況の変化を確実に捉えることが可能**
- **静止画トリミング機能搭載。**
- **1080p 60fps Full HD の動画記録**
- **USB3.2（Gen1）採用**
- **ネットワークプリント機能搭載（予定）**
- **簡易画像ブラウザ「GT FINDER」 / 画像管理ソフトウェア「GT PLUS」対応※**
※別売りオプション製品
- **動画管理システムへの拡張**
動画管理システム（SURGEONE v2※）への拡張が可能
※別売りオプション製品

その他の仕様

寸法 本体：239(W)×114(H)×337(D) mm

重量 本体：約 4.8kg

※仕様は改善のために変更することがあります

主な販売先

- 消化器内視鏡メーカー
- 消化器内視鏡システム販売店
- 医用画像ファイリングシステムメーカー

販売予定台数

- 年間 500 台

Web サイト： <https://teacmv.jp/>

報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちら

ティアック株式会社 情報機器事業部 事業推進部 販売促進課
TEL : 042-356-9154 FAX : 042-356-9185
E-Mail : isd-pm@teac.co.jp

読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします

ティアック株式会社 情報機器事業部
イメージングシステムソリューション営業部 メディカルシステム国内営業課
〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47
TEL : 042-356-9160 FAX : 042-356-9185
URL: <https://teacmv.jp/>

DICOM GATEWAY MV-5D に関する問い合わせは、下記の連絡先をお願いいたします

株式会社スリーゼット (DICOM GATEWAY 販売総代理店)
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 8 NCO 神田紺屋町 5 階
TEL : 03-5289-7531 FAX : 03-5289-7534
URL : <https://www.3zweb.co.jp>