


仕様		
記録	メディア	SDメモリーカード (2GB) SDHCメモリーカード (4/8/16/32GB) 外付けハードディスク (1TB/2TB)
	フォーマット	FAT16 / FAT32 (SD / SDHCメモリーカード) NTFS (外付けハードディスク)
	メディア内最大検査数	9999
	検査内最大ファイル数	5000
	※付属のSDカード以外を使用する場合は、SDスピードクラスが10以上のSDカードをお使いください。(SDスピードクラスが10未満のSDカードを使用すると録画や再生が正常に行われない事があります。)	
静止画	非圧縮方式	TIFF
	圧縮方式	JPEG
動画	ファイル形式	MPEG-2
映像入出力	NTSC : S-VIDEO / コンポジットビデオ	
	HD : HD-SDI / DVI / アナログHDTV	
	HD-SDI	1080i
	DVI	1080i
		1080p
		1280 x 1024
		1280 x 960
		1024 x 768
	アナログHDTV	1080i
	録画解像度	動画
※入力映像信号の解像度によらず、1920x1080で記録します。		
静止画		1920 x 1200
		1920 x 1080
		1280 x 1024
		1280 x 960
		1024 x 768
※映像信号によっては録画できない場合があります。		
インターフェース		RS-232C ×2
		RJ45 (LAN・1000BASE-TX / 100BASE-TX / 10BASE-T) ×1
	USBコネクター (A type) ×4	
	3.5φ ステレオミニジャック ×5	
電源	AC100V～230V 50/60Hz (100VAC 0.62A)	
外形寸法	本体	約202W×94H×282D(mm)
	リモコン	約77W×18H×190D(mm)
質量	本体	約3.2Kg
	リモコン	約200g
安全規格	電気用品安全法準拠	
環境条件	使用温度範囲	5 ～ 35 ℃
	保存温度範囲	－10 ～ 60℃
	使用湿度範囲	30 ～ 80%(非結露)

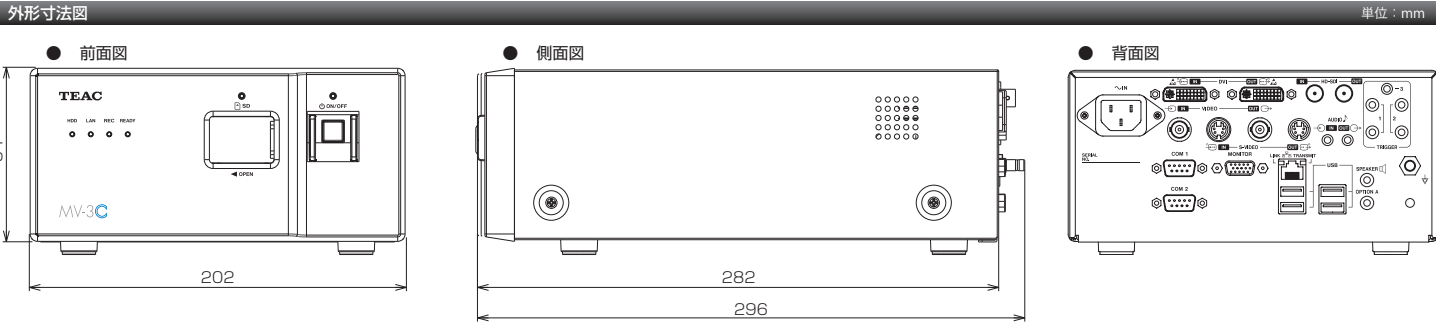

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

⚠

注意

※ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※ Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7 および Windows 8 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

※ SDロゴ および SDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。

※ View File は、ティアック株式会社の商標及び登録商標です。

※ その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です

ティアック株式会社 <http://teacmv.jp/>

MV営業課

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL 042-356-9160 FAX 042-356-9185

<http://teacmv.jp/>






MV-3CH


本装置は、医用画像診断装置に接続し、その診断装置が出力する画像を記録するレコーダーです。MPEG2 エンコードにより高解像度でありながら長時間動画記録を可能にしました。USB外付けハードディスクへの記録にも対応、大容量データ保存を実現し医用画像データ保存にさらなる利便性を提供します。



接続図

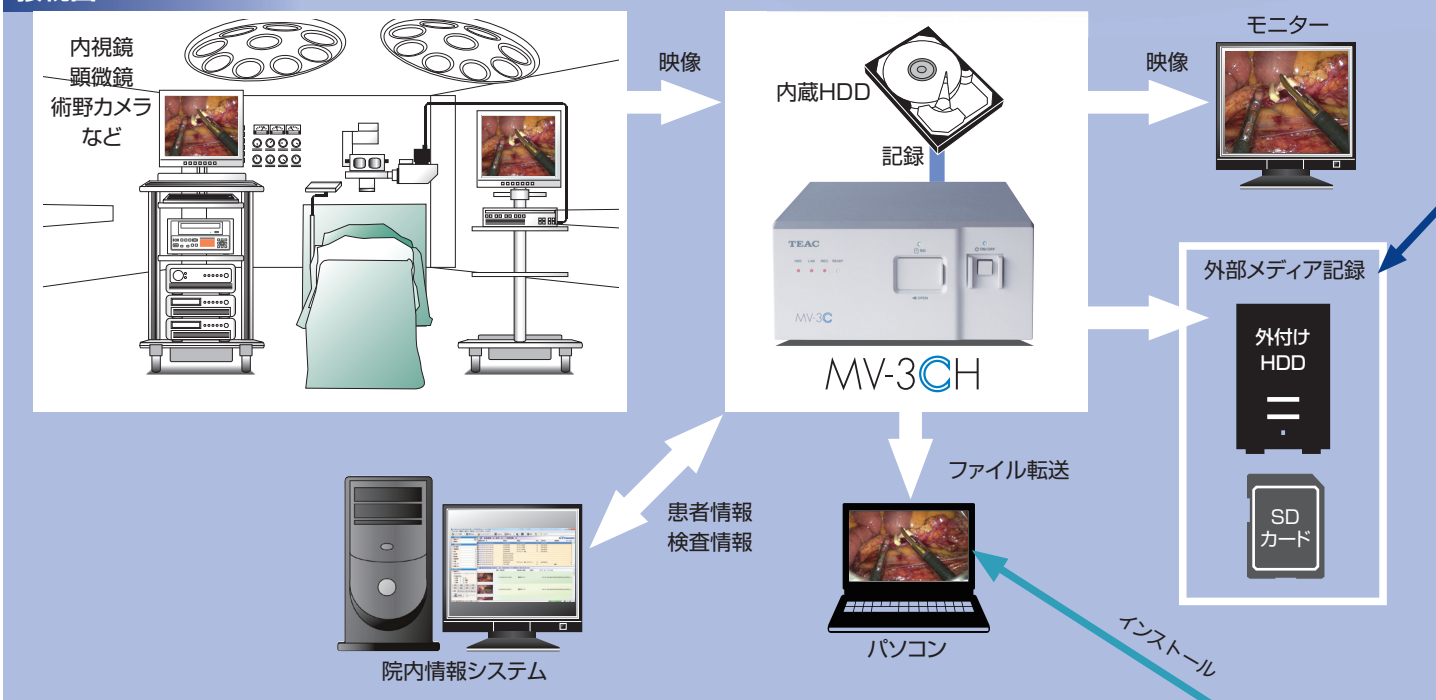

オプション ソフトウェア

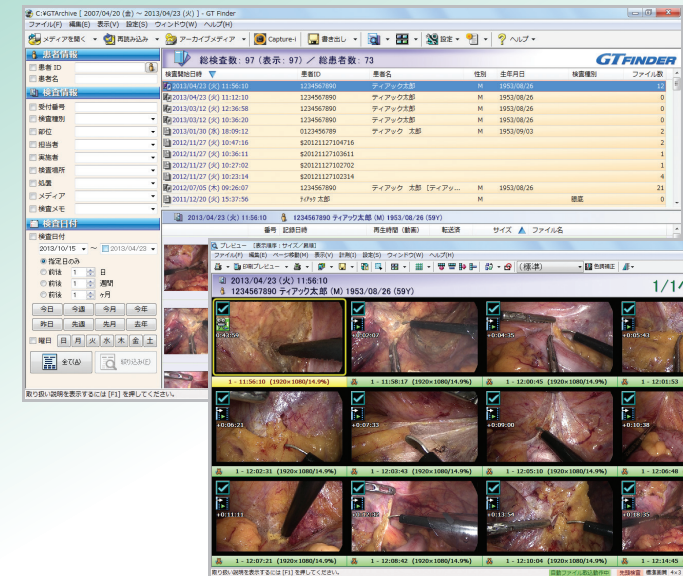


静止画・動画データを保存・閲覧する画像ビューワー

GT FINDER

- 主な機能
- 患者情報や担当者、検査情報など様々な条件でリスト表示の絞可
 - 検査内の全画像をプレビューウィンドウで一覧表示
 - ドラッグ&ドロップで選択した画像が簡単にコピー可能
 - レイアウトを指定して印刷が可能

- 再生はもちろん動画中の1コマを静止画として切り出しが可能
- 一つの動画内で、重要な場面だけを切り出して結合する編集機能
- 動画内の患者情報などを、マスキング機能で部分的に隠すことが可能

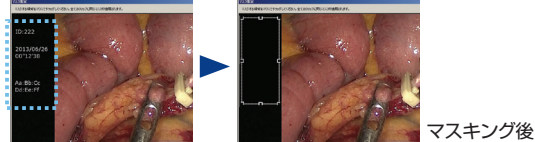

※ 動作環境: Microsoft Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32bit版/64bit版どちらも対応)

映像ご提供: 順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器外科学講座(下部消化管外科学) 様

長時間動画記録

MPEG-2エンコードにより高解像度かつ長時間動画記録を実現。内蔵HDDに加え、SDカードおよび外付けHDDに対応し、大容量データ保存が可能です。

動画編集が容易

付属のソフトウェア「Movie Player」を使うことにより、動画の再生はもちろん、長時間録画した映像の切り出しや結合が容易に行えます。

内視鏡とのシャッター連動

術中の画像記録を正確にするため、内視鏡のシャッターと連動して同時に記録します。(別途ケーブルが必要です。)

RS-232C通信連動

RS-232Cを介して外部機器からMV-3CHを制御することができます。

各種ビデオ信号に対応

標準ビデオ信号NTSC (S-VIDEO、コンポジットビデオ)に加え、高解像度ビデオ信号(HD-SDI/DVI/アナログHDTV)に対応。幅広い診断装置へご使用いただけます。

静止画像記録

動画だけでなく、静止画の記録も可能です。静止画は4種類の画質EQ(低画質)/SQ(標準画質)/HQ(高画質)/TIFF(非圧縮)で保存ができます。

録画アイコン表示


録画や一時停止、再生などモニターに状態を示すアイコンが表示され、動作の確認ができます。

ファイル転送

ネットワーク経由で、記録したデータを転送しファイル保存することが可能です。

標準内蔵 ソフトウェア 画像ファイル検索ソフトウェア *DV Finder* 動画再生ソフトウェア *Movie Player*

MV-3CHは、画像ファイル検索ソフトや動画ファイル再生ソフトを内蔵しているので、記録メディアをパソコンに接続するだけですぐに画像ファイル进行操作することが可能です。

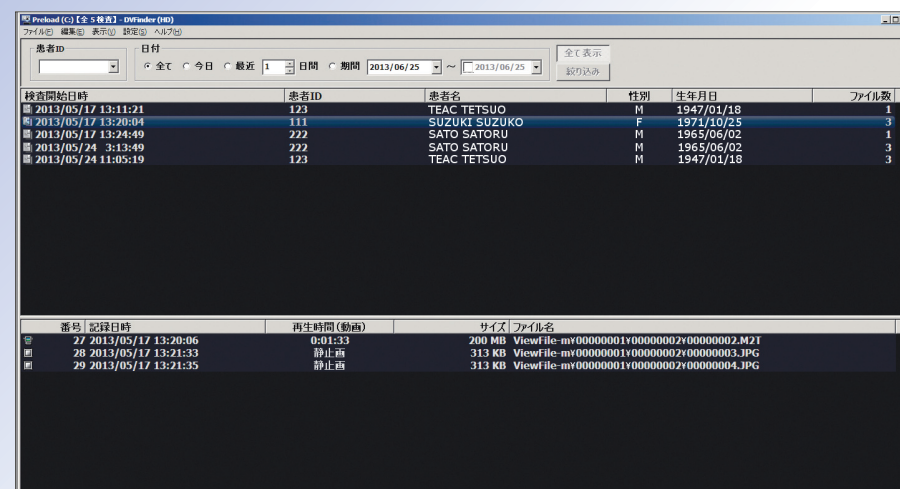

画像ファイル検索ソフトウェア

DV Finder

メディアに記録された検査内容を一覧で表示します。各種条件の組み合わせで、表示する内容の絞り込みが可能です。

また、検査内の動画／静止画ファイルを一覧で表示、各ファイルをダブルクリックすることで動画や静止画の再生が可能です。

動画再生ソフトウェア

Movie Player

アイコンをクリックするだけで、MV-3CHで記録した動画の再生、動画内クリップ作成や切り出し・結合といった各種操作が可能です。

動画だけでなく、任意の場面を静止画として切り出すこともでき、資料や書類の作成など様々な用途で記録画像が容易にご利用いただけます。



映像ご提供: 順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器外科学講座(下部消化管外科学) 様

※ 動作環境: Microsoft Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32bit版/64bit版どちらも対応)